


アンジュスマイル 電動つめやすり ネイルケアセット ANC-01

月齢 **0** ヶ月～

新生児から使えます

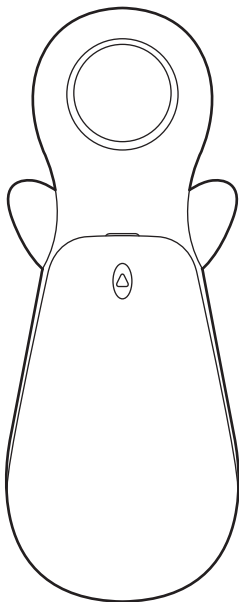

単3形アルカリ乾電池 1本使用(別売)

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

取扱説明書は大切に保管してください。

本品は赤ちゃんの爪をお手入れする製品です。他の目的に使用しないでください。


使用上の注意

- よりよく商品を使用する為、使用前に爪の水分・油分はふきとり乾燥させてください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出して保管してください。
- 本品は直射日光が当たる場所や湿気が多い水回り、火気の近くには保管せず、乾燥した日陰に保管してください。
- 本品はお子様の手の届かない場所に保管してください。**ネイルファイル、電池カバー、乾電池などの誤飲の恐れがあります。**

仕様・定格


サイズ	11.5×4.6×4.1cm
重量	51.5g(電池を除く)
電源	単3形アルカリ乾電池
電圧	1.5V
使用時の音	約35db
主な素材	本体：ABS樹脂+TPE素材 ケース：ポリスチレン フロッキング 発泡スチロール ネイルファイルベース：ABS樹脂 ネイルファイル：EVA スポンジ、紙

各部名称

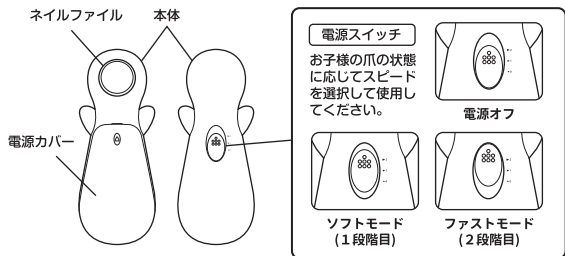


ネイルファイルの種類

※月齢は目安です。お子様の爪の状態に適したネイルファイルを使用してください。

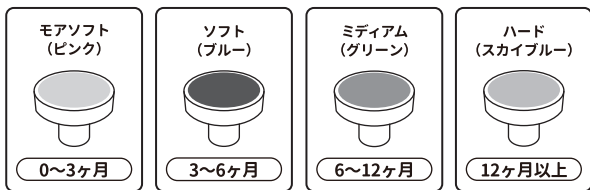

電池の入れ方


- ① 電池カバーを下へ押し下げる様にスライドさせて電池カバーを取り外します。
- ② 電極の向きに注意し、単3形アルカリ乾電池 (別売) を正しく入れてください。
- ③ 電池カバーを①と逆の要領で本体に取り付けます。

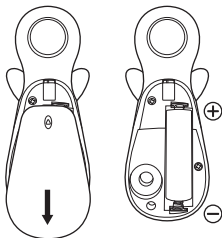

使用方法


爪を削る

- ① 赤ちゃんの月齢に合わせたネイルファイルを選び、本体のネイルファイル取り付け部に差し込みます。
- ② 電源スイッチを入れて速度を選択します。
- ③ 赤ちゃんの手を持ち、ネイルファイルを赤ちゃんの爪にやさしく当てるように削ります。

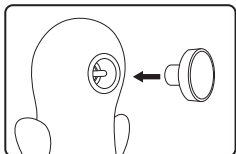


※ 爪の表面はお手入れしないでください。

- ※ お子様嫌がる場合は使用を中止してください。
- ※ 長時間同じ箇所にあてないでください。摩擦熱で熱く感じることがあり、過度なお手入れで指の怪我につながる恐れがあります。
- ※ 爪が弱い、爪や指に疾患がある、爪や指周辺に異常がある場合は使用しないでください。

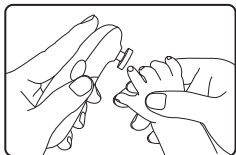

使用後のお手入れ・保管


- 電池収納部の横に1つネイルファイルを入れることが可能です。
- 使用後にネイルファイルの汚れが気になった場合、乾いた布でふき取ってください。
- 本体・ケース・ネイルファイルが汚れた場合、乾いた布でふきとってください。水洗いはできません。
- アルコール・シンナー・ベンジン等の溶剤を使用しないでください。
- ネイルファイル取付部の溝は定期的に綿棒や乾いたやわらかい布でふき取ってください。

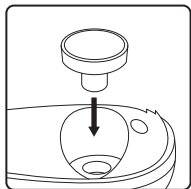

ネイルファイルの交換時期

- ネイルファイルは消耗品です。ネイルファイルの表面のざらつきがなくなった時や、汚れが気になった時が交換の目安です。
- 交換用ネイルファイルのご購入は販売店にお問い合わせください。

- ※ ネイルファイルベースは交換部品ではございませんので、破棄しないようご注意ください。

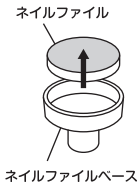

保証について

- 購入後 12 ヶ月以内、自然故障の場合に限り、修理もしくは交換いたします。(消耗品除く)
- 自然故障とは天災、落下、外部の物理的損傷(何かをぶつけた場合等)を除く故障です。
- 修理、交換の際にご購入者の住所、氏名、電話番号、購入日、販売店名などをご記載したものの確認が必要となりますので、保証書は大切に保管してください。
- 次の場合による故障は対象外です。
 - 使用に伴う外観の劣化 ■ 本体の水濡れ
 - 使用上の誤り・不当な修理や解体・改造・取扱い不注意による故障または損傷

保証書

アンジュスマイル 電動つめやすり ANC-01

保証期間	お買い上げの日から12ヶ月間	お買い上げ日	年 月 日
お名前		電話番号	
住所	sample		
ご購入店名			

[保証に関する問い合わせ先]

※保証に関するお問い合わせは、商品をお買い上げいただいた販売店にお問い合わせください。

販売元・お問い合わせ先

Chinavi 株式会社ちやいなび
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 7-1 川崎日進町ビルディング 10F

<https://chinavi.co.jp>

ちやいなび 検索

☎ 044-276-8741

(受付時間：10:00~17:00 / 土・日・祝日を除く)

